

安全储存，意义重大！

无论在实验室、化学品仓库还是应用到易燃可燃等物质的一般场所，引起火灾的主要原因之一是不恰当地贮存、处理易燃液体及化学品。火灾会瞬间摧毁一切，会造成企业的巨额损失及员工的生命安全威胁。当然，还有昂贵的社会成本、时间成本、信誉成本……



Laboratory Safety Cabinet (Standard)

实验室危化品管理及应急处理解决方案

专业存储转移易燃、可燃液体和弱酸碱腐蚀性液体，应用于科研院校、医药卫生、检验检测等企事业单位



公司简介

上海众御实业有限公司（前身为华纳威尔金属制品厂，成立于 2000 年）于 2012 年正式组建，专业研发和生产两大类产品：一类是符合美国职业安全健康管理局 OSHA 29 CER 1910.106 及美国国家消防协会 NFPA CODE30 等相关标准的，相关防火、防爆安全存储产品；一类是符合相关实验室安全和使用标准的，相关安全存储与操作型柜体产品。其中，易燃液体与化学品柜安全存储柜、气瓶存储柜、盛漏液托盘等产品为针对安全生产、物流与流通及设施安全存储；室外化学品暂存柜、PP 强酸强碱柜、净气型通风柜、净气型储药柜等产品用于实验室、科研院校、检测检验、医药卫生等机构。

公司生产设备



众御品牌荣誉客户

中科院、西安 / 山东 / 南京光电研究所、中国计量学院、中山大学、北方民族大学、北京印刷学院、首都经贸大学、上海理工大学、皖南医学院、同济大学、重庆大学、浙江大学、深圳大学、苏州大学、南京师范大学、华中科技大学、暨南大学、西北工业大学、陕西师范大学、哈尔滨工业大学、云南灵长类实验动物有限公司

中国人民解放军总医院、解放军第 454 医院、北京儿童医院、天津中医药大学第二附属医院、浙江大学医学院附属妇产科医院、浙江省常山县人民医院、宁波慈溪医工所、温州医科大学附属第一医院、上海市公共卫生临床中心、上海市北站医院、南京明基医院、南京先声药业、江西省赣州市第五人民医院

重庆市红汇脐血干细胞中心有限公司、重庆市第七人民医院、重庆北部新区第一人民医院、山东省泰安市东平县人民医院、广东省人民医院、汕头市金平区人民医院、仙乐健康科技、远大医药（中国）有限公司、恩施亚菲亚妇产医院、福建医科大学附属协和医院、陕西省杨凌示范区医院、昆山培力药品有限公司、无锡三院



目 录

室外化学品暂存柜	2
智能型安全储存柜	4
无管净气型智能安全柜	5
实验室安全存储柜	6
30/60/90 分钟防火存储柜	9
30/60/90 分钟防爆气瓶柜	9
毒麻药品安全存储柜	10
实验室 PP 酸碱柜	11
实验室药品柜 器皿试剂柜	12
实验室 PP 通风柜（外排型）	13
防爆气瓶柜（Ex 整体防爆）	14
实验室气瓶安全存储柜	15
紧急器材安全存储柜	16
呼吸器材安全存储柜	16
废液中转箱	17
实验室桌面平台	17
防溢应急吸附套装	18
聚乙烯防渗漏托盘	20
PE 贮存盘	22
IBC 吨桶防漏托盘	22
防火垃圾桶	23
生化垃圾桶	23
便携式洗眼器	24
紧急冲淋洗眼器	24


获欧盟 CE 认证及防爆认证，(Ex) 整体防爆，为室外危化品存储提供专业的解决方案。柜体采用防磁镀锌耐候钢，钢焊接主体，耐火存储设计标准，可选配多种系统来满足操作需求，如温控系统、可燃气体探测、声光报警、自动灭火系统等。



层架式危化品暂存柜：存储圆桶及 IBC 桶等一些大型容器
适用于危化品仓库、室内或生产车间的分散存储，室外的中央仓库

步入式危化品暂存柜：存储圆桶及小型容器
适用于危化品仓库、室内或生产车间的分散存储，室外的中央仓库

危险废弃物暂存柜：暂存不同类型的实验室有毒有害废弃物
适用于学校、医疗、化工、科研等使用危化品及废弃物等场所

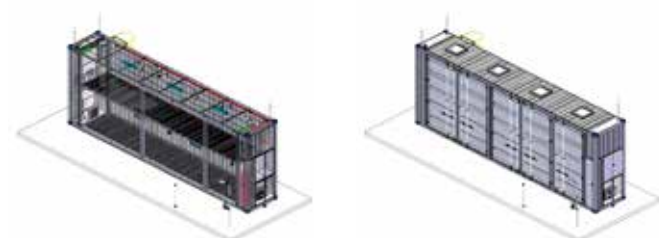

层架式



步入式

层架式危化品暂存柜		型号	ZYCCX5000	ZYCCX6000	ZYCCX7000
高 × 宽 × 深		mm	3000×7000×1800	3400×7000×1800	3200×7000×1800
容量	IBC	个	-	6×2 层	6
	Drum	个	16×2 层	-	16
门体结构			对开门（滑门、拉门可选）		
备 注			IBC=1000 升方桶， Drum=200 升标准圆桶		
步入式危化品暂存柜		型号	ZYCCX3000-1	ZYCCX3000-2	ZYCCX3000-3
高 × 宽 × 深		mm	2800×6000×2300	2800×9000×2300	2800×12000×2300
门体结构			对开门		
危险废弃物暂存柜		型号	ZYCCX4000-1	ZYCCX4000-2	ZYCCX4000-3
高 × 宽 × 深		mm	2800×6000×2300	2800×9000×2300	2800×12000×2300
门体结构			对开门		

备注：暂存柜系列产品表格中均为常规尺寸参数，接受定制尺寸订单

智能系统组成模块



国家级  防爆安全检测认证 Ex 整体防爆

防爆温控系统、防爆通风系统、活性炭净化系统、柜内消防系统、柜内环境监测系统、防爆配电及控制系统、智能管理系统、防爆照明系统、泄压系统、应急喷淋系统、门禁系统、防泄漏系统、防雷防静电系统等 ...



防爆温控系统



防爆通风及净化系统



防爆配电及控制系统



防爆照明系统



自动消防灭火系统



柜内环境监测系统



防爆温度探头



防泄漏系统



智能管理系统

智能型易燃品毒害品柜

专业存储各类既需严格温度控制，又需高度安全保障的物品

适用物品：危险化学品、有毒化学品、贵重药品和科研标本等



众御智能型安全储存柜 实验领域安全存储专家

通过欧盟 CE 认证，符合 EN 14470、EN 13501 对易燃品毒害品柜的认证标准、符合美国消防协会 (NFPA) 及美国职业安全健康管理局 (OSHA) 相关规范。规范的安全警示色柜体，代表不同的存储物质类型，使识别、组织归类与区分物质或液体变得显而易见。另外，倘若发生火灾，也利于消防人员识别危险化学品。

— 黄 色 —

易燃品安全储存柜

— 蓝 色 —

毒害品安全储存柜



柜顶风口内置风机、过滤机芯

柜体采用钢板制成，坚固耐用，使用寿命长。

不间断式门铰链，可轻松启闭，使关门顺畅，防止门下挂。



柜体内胆为瓷白色 PP（聚丙烯）内胆，耐强酸强腐蚀。

阶梯式 PP 安全隔板，设有透气孔。耐强酸碱、耐腐蚀、易清洁。



- ◆ 内置特种过滤机芯，无需外排管道，插电即可使用。
- ◆ 全天候监控外部空气质量指数，确保空间气体健康安全。
- ◆ 内置防爆气体探测器，搭配温湿度探测器，联动风机，实现自动检测以及排风处理。
- ◆ 内设三层阶梯式 PP 聚丙烯树脂搁板，搭配 PP 内胆。
- ◆ 智能化管控锁具，提高管理安全性的同时，增加智能化数据管理。

顶部设有液晶触摸显示屏，可实时监控柜内温湿度情况。

配有微电脑时控开关，可根据设定，自动开启和关闭风机。

专业规范的六国语言警示标签，提醒周围人群注意安全。

双层防火钢板构造，表面环氧树脂静电喷涂，防止化学药品侵蚀。

双锁配置，可实现双人保管，加强管理，以防丢失意外。



柜侧底部设有进风口，柜内通风。



产品通过欧盟 CE (EN14470-1) 认证
符合 OSHA 和 NFPA 标准
应用于实验室、生化、科研、药品存储等场所

- ◆ 可有效管理大量药品或样品，具有抗腐蚀特性。
- ◆ 无需管道安装，搬运到位即可使用。
- ◆ 带脚轮移动方便，就近存储，提高工作效率。

产品尺寸	门类型	标配层板	层板承重	风机	净化设备	控制系统	黄柜 型号
1840×900×510mm	双门	3 块	50kg	1 套	1 套	触摸显示屏	ZYC0060E
1960×900×510mm	双门	3 块	50kg	1 套	1 套	触摸显示屏	ZYC0090E

安全柜符合 OSHA 29CFR 1910.106 和 NFPA CODE30 标准。

厚度大于 1.0mm 的钢板经过点焊接, 使用寿命长, 防火性能好。

防溢漏式层板可在每 6 厘米层档上下之间调节。两侧焊接的层板支撑挂钩稳固可靠。

装设有防闭火装置的双透气孔 (在柜体侧面)。有效减小挥发性物质浓度, 预防火灾隐患。



专业规范的六国语言警示标签, 清晰可见。

柜子内外环氧树脂静电喷涂, 表面光亮耐腐蚀。


三点联动式门锁, 轻松自如启闭 180° 的柜门配有双钥匙。

按照 OSHA 规范, 柜身设有静电接地传导端口, 方便连接静电接地线。

安全搁板将意外溢出液体安全地引导至盛漏槽的后侧和底部。



三点联动式平面门锁

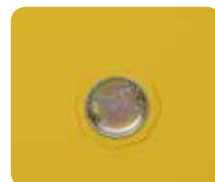

避火装置的双透气孔



防静电接地导线端口

易燃液体安全存储柜 实验领域安全存储柜

符合 OSHA 29 CFR1910.106(美国职业安全健康管理局) 和 NFPA CODE30 (美国国家消防协会) 相关规制, 并按照 FM 认证项目要求设计、测试与生产。同时, 本产品还通过了欧盟 EN14470-1 标准的 CE 认证, 规范的安全警示色柜体, 代表不同的存储物质类型, 使识别、组织归类与区分物质或液体变得显而易见。另外, 倘若发生火灾, 也利于消防人员识别危险化学品。

OSHA 29 CFR 1910.106 美国职业安全健康管理局 (OSHA) 关于易燃及可燃液体的规定


OSHA 29 CFR 1910.106(a)(19) 可燃液体

可燃液体是指属于 II 级、III 级等级的化学液体 [闪点 $\geq 100^{\circ}\text{F}$ (37.8 $^{\circ}\text{C}$)], 详见示意图。

OSHA 29 CFR 1910.106(a)(19) 易燃液体

易燃液体是指属于 IA-IC 类的 I 类化学液体 [闪点 $< 100^{\circ}\text{F}$ (37.8 $^{\circ}\text{C}$)], 详见示意图。

易燃或可燃液体分类 (依闪点划分)

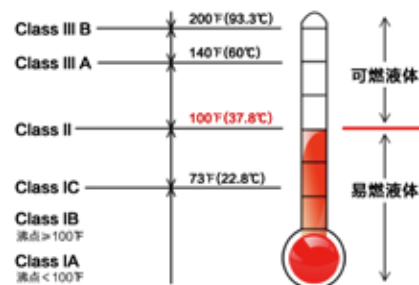

化学品安全柜可选类别



化学易燃品举例

- 闪点在摄氏四十五度及四十五度以下的易燃液体（如乙醚、汽油、甲醇、二硫化碳、丙酮、苯、乙醇、丁醇等等）
- 易燃、容易自燃及遇水燃烧的固体（如硝化棉、赛璐珞、赤磷、黄磷、影片、钾、钠、电石等等）
- 易燃及助燃气体（如氢气、乙炔气、煤气及氧气等等）
- 能成为爆炸混合物或引起燃烧的氧化剂（如氯酸钾、氯酸钠、硝酸钾、或氧化钠、硝酸等等）
- 其他类型的还有象白磷（能自燃）、爆竹、室内易燃物品：
 - 燃点在 45 度（含本数）以下的易燃液体类（如乙醚、二硫化碳、丙酮、乙醇等）
 - 一级易燃固体、一级自燃物品、一级遇水燃烧物品类（如硝化棉...）

如何选择易燃液体与化学品安全储存柜

储存容器

依据储存容器的类型及其容积的适配性，请确认您所储存的化学品容器是否如下：安全罐、55 加仑以下的油桶、容积较小的涂料罐、4 升的瓶子，喷雾剂瓶或更小的瓶子。各类储存容器须保持密闭。

贮存容量

确定所需要的安全存储柜的容量，根据您计划储存的化学品容器的容积，选择符合您需求的特定容量的安全存储柜，越大贮存容量的安全存储柜能够提供更大的存储空间。ZOYET 安全柜常规存储容量覆盖 9 类，分为 4 加仑、12 加仑、22 加仑、23 加仑、30 加仑、45 加仑、60 加仑、90 加仑、110 加仑、您可根据存放空间及存储量选配适合的款型。

使用环境

确认安全存储柜的使用环境，确保安全存储柜在室内水平界面使用，所处环境远离火源、干燥通风。依据需要选择落地式或台式安全存储柜、或实验室通风柜配套使用的安全存储柜（如 ZOYET12 加仑安全存储柜）。另可根据柜体内泄漏预防需要，配置适合的 PE 托盘。

化学属性

依据计划储存的化学物质的化学品安全数据表（MSDS）确定其化学特性及存放要求，选择在颜色及标签管理体系下对应类别的安全存储柜，对化学品进行分类分级管理，并避免化学品储存不兼容导致的火灾、毒气反应及爆炸等危险。

小型安全存储柜

安全存储易燃可燃及腐蚀性液体，符合相关条例要求。适用于多种类型的狭小工作场所，便于快速存取物品。应用于化工、实验室、科研机构等各种领域。



附件：

镀锌层板	ZYC0004	ZYC0012	ZYC0013	ZYC0023
是否适用	√	√	-	√
货号	212002	212003	-	211008
PP 托盘				
适用型号	√	√	√	√
货号	212022	212023	212028	212029



高 × 宽 × 深 mm	560x430x430	890x590x460	460x1090x460	890x860x490
容积 加仑 / 升	4/15	12/45	13/45	23/87
可调层板 块	1	1	-	1
层板承重 kg	50	50	-	50
门类型	单门 / 手动	单门 / 手动	双门 / 手动	双门 / 手动
型号 黄 色	ZYC0004	ZYC0012	ZYC0013	ZYC0023
型号 红 色	ZYC0004R	ZYC0012R	ZYC0013R	ZYC0023R
型号 蓝 色	ZYC0004B	ZYC0012B	ZYC0013B	ZYC0023B

实验室安全存储柜规格参数



安全存储易燃可燃及弱腐蚀性液体，符合相关条例要求



黄色存放易燃性液体

红色存放可燃性液体

蓝色存放弱腐蚀性液体

灰色存放毒性化学品

- ◆ 采用冷轧钢板，整体为双层防火钢板构造，两层钢板之间间隔 38mm 防火层。
- ◆ 柜身底部有 50mm 的防漏液槽，防止化学液体的外溢。
- ◆ 柜体内外都喷涂有无铅的环氧树脂漆，增加抗化学品的能力。
- ◆ 三点联动式门锁，开合自如；配可调平衡支脚，内置静电接地线端口。



- ◆ 镀锌层板适用于易燃可燃安全柜，PP 托盘适用于腐蚀品安全柜，需与安全柜层板配套使用。
- ◆ GA 机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证（符合 GAT/73 标准）。

高 × 宽 × 深	mm	1650x590x460	1120x1090x460	1650x1090x460	1650x860x860	1650x1090x860	1650x1500x860
容积	加仑 / 升	22/83	30/114	45/170	60/227	90/340	110/410
可调层板	块	2	1	2	2	2	2
层板承重	kg	50	100	100	100	100	100
门类型		单门 / 手动	双门 / 手动	双门 / 手动	双门 / 手动	双门 / 手动	双门 / 手动
型号	黄 色	ZYC0022	ZYC0030	ZYC0045	ZYC0060	ZYC0090	ZYC0110
型号	红 色	ZYC0022R	ZYC0030R	ZYC0045R	ZYC0060R	ZYC0090R	ZYC0110R
型号	蓝 色	ZYC0022B	ZYC0030B	ZYC0045B	ZYC0060B	ZYC0090B	ZYC0110B

电子密码锁

适用于 12 加仑以上的安全储存柜



三点联动防爆锁

适用于所有型号的安全储存柜



GA 机械锁

适用于所有型号的安全储存柜



30/60/90 分钟防火存储柜

CE EN 13501 EN 14470 NFPA OSHA RoHS

工作区安全存储易燃、易爆和有毒物



- ◆ 特制 CFM 防火材质构成，达到 30、60、90 分钟防火测试。
- ◆ 结构坚固耐用，抗扭强度高，符合 GS 标准。
- ◆ 铰链门可以在任何位置锁定，柜门带有可调节阻尼机制，遇火灾可自动闭合。
- ◆ 3 块隔板，承重 75kg（均匀承载），可以 32mm 为间距自由调节高度。1 个底层贮存盘，喷粉钢板制成。

高 × 宽 × 深	mm	1950x890x614	1950x890x614
层板	块	3	3
盛漏底架	块	1	1
钥匙锁配置	把	3	3
门类型		双门 / 自动闭合	双门 / 自动闭合
款式		层板式	抽屉式
型号		ZYC0060-9-1	ZYC0060-9-2



30/60/90 分钟防爆气瓶柜

用于实验室、医院、工矿企业及需存放高压气瓶柜的场所

- ◆ 可安装连接管和气路装置，集成通风可连接机械通风系统。
- ◆ 底部带叉车槽，方便运输。
- ◆ 水平调节装置，即使在非水平地面也能平衡使用。
- ◆ 圆筒锁设计。

高 × 宽 × 深	mm	1950x890x614
可选设备配置		坡道、气瓶托架、气瓶绑带
门类型		双门 / 自动闭合
型号		ZY-FBQPG-2-9





◆ 符合 OSHA 和 NFPA 标准的产品线

即使在工作空间较小的地方，小型毒麻药品柜能成为您的安心之选。

◆ 毒麻药品警示标签，容易辨认识别

乳白色或浅灰色柜体，有别于易燃与一般性腐蚀性液体的存储柜。


◆ 多种常规产品尺寸，提供全容量存储方案

应用于化工、公安、安监等相关行业和实验室等应用领域。

通过欧盟 CE 认证，符合 EN 14470、EN 13501 对易燃液体储存柜的认证标准、符合美国消防协会 (NFPA) 及美国职业安全健康管理局 (OSHA) 相关规范、中国国家安全生产监督管理局《危险化学品安全管理条例》



电子密码锁

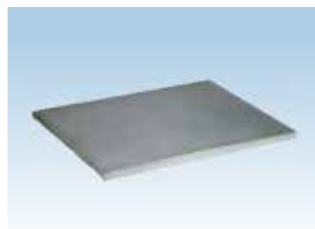

可调层板

- ◆ 整体为双层防火钢板构造，两层钢板之间间隔 38mm 防火层
- ◆ 厚度大于 1.0mm 的钢板经过点焊接，使用寿命长，防火性好
- ◆ 机械锁 + 电子密码锁双锁管控，方便管理更安全
- ◆ 5 厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢
- ◆ 专业规范的毒麻药品警示标签显而易见
- ◆ 装设有防闭火装置的对流双透气孔
- ◆ 可调式镀锌层板可在每 6 厘米层挡上下之间自由调节
- ◆ 柜子内外环氧树脂静电喷涂，防止化学品侵蚀
- ◆ 严格按照 OSHA 规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线

高 × 宽 × 深	mm	890x590x460	1650x590x460	1120x1090x460	1650x1090x460	1650x860x860	1650x1090x860
容积	加仑 / 升	12/45	22/83	30/114	45/170	60/227	90/340
可调层板数	块	1	2	1	2	2	2
层板承重	kg	50	50	100	100	100	100
门类型		单门手动	单门手动	双门手动	双门手动	双门手动	双门手动
型号		ZYC0012W	ZYC0022W	ZYC0030W	ZYC0045W	ZYC0060W	ZYC0090W

附件


货号	层板	212001	212002	212003	212004	212005	212006
货号	PP 托盘	212021	212022	212023	212024	212025	212026

用于腐蚀性化学品的规范管理，分类储存

- ◆ 采用抗强腐蚀 PP 板材无缝焊接而成，配备聚丙烯防渗漏托盘，可单独取出，便于清洁，可根据需求调节层板高度。
- ◆ 为提高操作安全性，可使用挂锁提供额外的防护。
- ◆ 用于各类腐蚀性化学品的存储，如硫酸、硝酸等，保护使用者和周围人群的安全。
- ◆ 适用于医药、化工、实验室等领域。

PP 聚丙烯储存柜 – 专业为储存强腐蚀性的化学品物质而设计，柜体采用抗强酸碱耐冲击的瓷白色 PP 板，采用同色同质焊条一体焊接成型。特殊规格的瓷白色 PP 聚丙烯抗强腐蚀性化学品安全储存柜也可以为客户专门定制。

PP 聚丙烯储存柜用于存储各类强酸强碱化学物质。三大强酸是：硫酸、盐酸、硝酸。三大强碱是：氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钡。

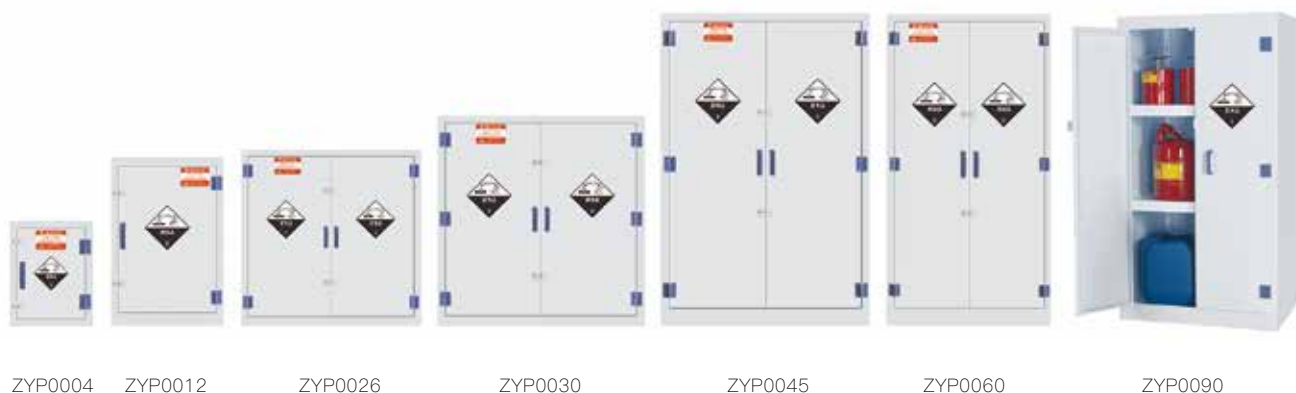

挂锁



层板



铰链

高 × 宽 × 深 mm	560x430x430	890x590x460	900x910x600	1120x1090x460	1650x1090x460	1650x860x860	1650x1090x860
容积 加仑 / 升	4/15	12/45	26/100	30/114	45/170	60/227	90/340
可调层板数 块	1	1	1	2	2	2	2
层板承重 kg	25	30	35	40	40	40	40
门类型	单门手动	单门手动	双门手动	双门手动	双门手动	双门手动	双门手动
型号	ZYP0004	ZYP0012	ZYP0026	ZYP0030	ZYP0045	ZYP0060	ZYP0090

附件

货号	PP 层板	211400	211401	211402	211403	211404	211405	211406
----	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

电子密码锁

耐腐蚀安全锁

货号	212041	货号	211410
----	--------	----	--------



实验室药品柜 | 器皿试剂柜

用于实验室大量药品或样品的分类有序储存

视窗采用钢化玻璃（依实际使用状况可选有机玻璃或钢化玻璃）制作

采用瓷白色抗强腐蚀 PP（聚丙烯）板材无缝焊接而成，具有耐强酸、强碱和抗腐蚀的特性，降低环境污染

柜内活动式 PP 层板可根据需要调节高度，四周立边可获一定程度的防溢效果

门铰链采用经过射出成型的 PP 材料制成，耐腐蚀性好



层板



双挂锁

区别：药品柜与试剂柜的主要区别在于物品存放层板的不同：药品柜主要是水平层板或阶梯式层板；器皿柜需要在层板上按照客户实际要求制作孔洞。

标准尺寸有可视窗和不透明门板的两种选择，满足不同应用场合的需求。



ZYPM1800-1



ZYPM1800-2



ZYPM1800-3



ZYPM1800-4

高 × 宽 × 深	mm	1800x900x450	1800x900x450	1800x900x450	1800x900x450
可调层板数	块	2	2	2	2
层板承重	kg	50	50	50	50
视窗配置		无可视窗	带可视窗	无可视窗	带可视窗
门类型		双门手动	双门手动	四门手动	四门手动
型号		ZYPM1800-1	ZYPM1800-2	ZYPM1800-3	ZYPM1800-4

实验室 PP 通风柜（外排型）



有优良的耐酸性能，可以从事强度高的酸碱实验

- ◆ 采用 8mm 厚 PP 板，经剪板，PP 焊条焊接而成。
- ◆ 控制面板：设计在外面板上，便于观察与操作、控制。
- ◆ 导流板：采用 8mm 厚 PP 型材，分上、中、下三层，能对不同重量的气体有效的排放。
- ◆ 集气风罩：采用 PP 板成型锥形缩口集气风罩，集气风罩具有良好的锥型集气角度及圆滑度，平均排气。
- ◆ 通风柜符合中华人民共和国机械行业标准《排风柜》JB/6412-1999 技术标准要求
- ◆ 在 -8℃到 +80℃温度范围内具有耐腐蚀，抗强酸等特性
- ◆ 易清洁，并具有一定的机械强度，耐搬运移动
- ◆ 应用于高强度酸碱实验，净化室等场所



高 × 宽 × 深	mm	2350x1200x850	2350x1500x850	2350x1800x850
门类型		双门手动	三门手动	四门手动
型号		ZYTP1200	ZYTP1500	ZYTP1800

防爆气瓶柜 (Ex 整体防爆)



通过欧盟 CE 认证、国家级防爆安全部检验检测，拥有防爆合格证
深圳地标产品，符合 DB4403/T 79-2020 标准要求

- ◆ 整体为 1.2mm 厚优质冷轧钢板，表面环氧树脂静电喷涂。
- ◆ 柜体两侧设有 PASS 孔，气管通过 PASS 孔，适配气瓶的高度。
- ◆ 采用的防爆型气体检（探）测器，可识别大多数可燃气体，具有防爆认证。
- ◆ 配置防爆声光报警装置，当柜内传感器检测到气体泄漏时，自动报警。
- ◆ 易燃气体气瓶贮存柜设置自动连锁强排风扇，通过排风管排出室外。
- ◆ 毒性气体通过排风管与吸收处理装置连接，保证工作区域的人身安全。
- ◆ 柜内安装厚实牢固的扎带固定气瓶，防止气瓶倾倒。

- * 易燃气体气瓶贮存柜
设置可燃气体检测报警装置
- * 有毒气体气瓶贮存柜
设置有毒气体检测报警装置

NEW



瓶数		单瓶	双瓶	三瓶
Ex 防爆气瓶柜	型号	ZY-FBEX-1	ZY-FBEX-2	ZY-FBEX-3
高 x 宽 x 深	mm	1990x600x450	1990x900x450	1990x1200x450



用于提高局部的排气通风，保护钢瓶（气瓶）不受柜子外面火灾以及保护周围物免受内部火灾，可达到隔离高温及保护人身安全的作用

- ◆ 冷轧板制成，酸洗磷化处理。表面环氧树脂粉末喷涂，180°高温固化成型，耐腐蚀。
- ◆ 柜内配有气瓶抱箍，防止气瓶倾倒，采用 5mm 厚平板玻璃。

- ◆ 报警器（选配）：采用专用可燃气体探测器，空气扩散采样，达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警。
- ◆ 柜内配有排风系统，配合报警装置，一线连接，在报警后 5 秒内自动启动排风装置，稀释可燃气体浓度直至低于芯片切点设定值。
- ◆ 活动翻板采用钢板表面磷化处理（对钢板酸洗磷化去油、去锈、表面形成一层保护膜使其有防腐蚀效果）配合固定铰链使用，便于气瓶的装卸。
- ◆ 采用微电脑定时开关、气敏探头可监测气瓶漏气并自动排风、报警。

瓶数		单瓶	双瓶	三瓶	四瓶
全钢气瓶柜	型号	ZY-QPG-1	ZY-QPG-2	ZY-QPG-3	ZY-QPG-4
高 x 宽 x 深	mm	1800x600x450	1800x900x450	1800x1200x450	1800x1500x450
防爆气瓶柜	型号	ZY-FBQPG-1	ZY-FBQPG-2	ZY-FBQPG-3	ZY-FBQPG-4
高 x 宽 x 深	mm	1900x600x450	1900x900x450	1900x1200x450	1900x1500x450

* 柜体不含气体探头及报警器，需另配。

气体探测报警器：

气体检测	通用易燃气体	氧气 O ₂	氢气 H ₂	氮气 N ₂	甲烷 CH ₄	乙炔 C ₂ H ₂	一氧化碳 CO
货号	211500	211501	211502	211503	211504	211505	211506

气体检测	氨气 NH ₃	氩气 AR	氯气 CL ₂	氦气 HE	一氧化二氮 N ₂ O	二氧化硫 SO ₂	硫化氢 H ₂ S
货号	211507	211508	211509	211510	211513	211517	211518

* 更多特殊气体检测请电话咨询。

紧急器材安全存储柜



- ◆ 采用冷轧钢板制成，外喷环氧树脂。
- ◆ 标准双开门，带有长视窗设计，便于辨认柜内存放的装备器具。
- ◆ T 型隔物架结构，可存放如防护服之类的大件物品。

高 × 宽 × 深 mm	1200x900x500	1920x900x500
视窗配置	带可视窗	带可视窗
门类型	双门手动	双门手动
型号	ZYEP01	ZYEP02

呼吸器材安全存储柜

用于呼吸器具卫生安全的存储及方便提取

- ◆ 密闭镀锌钢结构，可有效防尘保证呼吸器清洁卫生。
- ◆ 挂墙式设计方便穿戴，气瓶支架适用于呼吸器具存放。
- ◆ 柜门为视窗设计，便于识别存放器具，方便个人迅速穿戴。

高 × 宽 × 深 mm	750x450x265	750x820x268
门类型	单门手动	双门手动
呼吸器存放数 套	单套	双套
型号	ZYEP01	ZYEP02





适用于化工、实验室、科研机构等领域

- ◆ 采用 1.0mm 及以上冷轧钢板满焊焊接制成。
- ◆ 柜门配有三点联动式门栓，防腐蚀双锁，链须为无缝式钢琴铰链，柜门 180 度打开。
- ◆ 柜内底部设有高于 5 厘米的防漏液槽，液体不外溢，产品符合 OSHA 规范。
- ◆ 柜子内外喷涂环氧树脂粉，防止化学侵蚀和防静电。
- ◆ 柜门粘贴专业规范的警示标签。
- ◆ 柜子顶部内置专业的集液口，防止回收液体时导致液体泄漏和溅落，留有专业的个人防护装备（护目镜、防化手套）存放位置可配置相关装备。
- ◆ 柜子底部安装大直径橡胶滚轮方便移动，并配置刹车。



柜身双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有 38mm 的防火层

可存放防护装备：
护目镜、防化手套



型号	高 × 宽 × 深 mm	桶型	门类型
ZYCF025	890×860×490	25L 双桶	双门，手动

实验室桌面平台

耐化学性盛装盘，内置盛装结构

- ◆ 喷嘴方便排出漏液
- ◆ 半透明的侧壁有助于发现泄漏
- ◆ 盛装盘可盛装 5.6L 漏液
- ◆ 体积小，可放在桌面或台面上



长 × 宽 × 高	mm	430×305×100
容积	L	5.6
货号		201260

防溢应急吸附套装

意外事件有可能会发生，当遇到紧急情况时，防溢应急吸附套装是您理想的选择。拿取使用方便，以备您的不时之需。套装中的各类配件亦可根据您的需要进行增减。

适用于清理、围堵、预防任何可能出现的油液和化学品泄漏的区域，包括生产制造业、运输业、石油化工工业、海上紧急救援、港口、航空、公安消防、医疗业、能源电力业、环保局、军队、食品加工等任何需要清除泄漏液体的场所。

白色 吸收油液和油基液体，不吸水
黄色 吸收强酸和强碱、固化液和未知液体
灰色 吸收油液、冷却液、水等各类液体



套件吸收量	30L		45L		120L		240L	
详情	吸附片	20pcs	吸附片	30pcs	吸附片	50pcs	吸附片	100pcs
	吸附索	2pcs	吸附索	3pcs	吸附索	10pcs	吸附索	16pcs
	吸附枕	2pcs	吸附枕	4pcs	吸附枕	10pcs	吸附枕	8pcs
	乳胶手套	1pairs	乳胶手套	1pairs	乳胶手套	2pairs	乳胶手套	2pairs
	回收袋 & 扎带	2sets	回收袋 & 扎带	3sets	回收袋 & 扎带	8sets	回收袋 & 扎带	10sets
	护目镜	1pairs	护目镜	1pairs	护目镜	2pairs	护目镜	2pairs
	套件包	1pcs	套件包	1pcs	120L 圆形套件桶 / 带轮可移动套件桶	1pcs	240L 带轮可移动套件桶	1pcs
型号	ZYSK30 系列		ZYSK45 系列		ZYSK120 系列		ZYSK240 系列	

防溢吸附桶

聚乙烯材质一次滚塑成型，抗紫外线、防腐蚀，可抗大多数化学品。防溢吸附桶可应对轻度泄漏的处理，如易燃类、腐蚀类、毒性物质等有害废弃物储存及运输和转运。

尺寸	mm	590×500	590×780
重量	kg	6.5	7.5
承载重量	kg	80	100
盛漏量	L	≥ 80	≥ 120
型号		ZYAS-20D	ZYAS-30D



吸油垫易撕型

地面或水面大面积铺放，工厂车间，机械擦拭等有油污及化学品泄露的区域

易撕型压点 / 复合压点吸油垫，表面经过超声波压点或复合压点，更耐磨强韧。带有易撕线，方便选取适合尺寸。



尺寸	mm	400×500	400×500	400×500	400×500
厚度	mm	2	3	4	5
包装数量	PCS/B	100	100	100	100
吸收量	L/B	≥ 120	≥ 126	≥ 135	≥ 144
型 号		ZYA210-3 系列	ZYA310-3 系列	ZYA410-3 系列	ZYA510-3 系列

吸附条

油罐车、油箱、输油管道、车间机器、水面等有油污及化学品泄露的周边

柔软，可任意弯曲放置在所需的地方，防止油污泄露扩散。吸收石油质产品，但不吸收水质产品。



尺寸	mm	76×1200 ^Φ	100×3000 ^Φ	127×3000 ^Φ	200×3000 ^Φ
包装数量	PCS/B	20	4	4	4
吸收量	L/B	≥ 126	≥ 108	≥ 130	≥ 288
型 号		ZYAS01 系列	ZYAS02 系列	ZYAS03 系列	ZYAS05 系列

吸附枕

有油污及化学品泄露的地面、龙头、阀门、机械、管道下方、或凹凸不平的区域

体积小，吸收量大，可配合塑料托盘使用。



尺寸	mm	400×500	400×500	400×500
包装数量	PCS/B	16	16	16
吸收量	L/B	≥ 144	≥ 144	≥ 144
型 号		ZYOP16-O	ZYOP16-C	ZYOP16-G



能够控制泄漏、带盛漏槽的 PE 聚乙烯托盘，用于多种化学品存储桶的搬运，也可以在上面进行各种操作（抽取油品、灌装、分装等）

本页所有产品液压车可用




平台液压车示意图



托盘液压车示意图

- ◆ 橘皮表面防滑格栅满载时不会发生劈裂，可拆卸；配置排液口，便于快速处理盛漏液体；
- ◆ 盛漏托盘和平台均可使用液压车搬运，可承载 200L 油桶、化学品桶及各种存储容器和小型机械设备。
- ◆ 聚乙烯材质可抗绝大多数化学品，结构坚固，可叠加，节省空间及运输成本。

类型		平 台		托 盘	
长 × 宽 × 高	mm	1300×690×150	1300×1300×150	1300×690×300	1300×1300×300
可容纳	200L 圆桶	2	4	2	4
渗漏量	L	65	120	120	250
静载	kg	1200	2600	1200	2600
动载	kg	600	1200	600	1200
型号		ZYPE002-H	ZYPE004-H	ZYPE022-H	ZYPE044-H

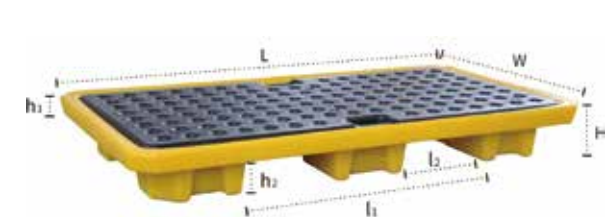


ZYPE002-H

聚乙烯平台（两桶）						mm
L	W	H	l ₁	l ₂	h ₁	h ₂
1300	690	150	685	250	45	100
机动叉车、550/685 液压车双向操作						




ZYPE004-H

聚乙烯平台（四桶）						mm
L	W	H	l ₁	l ₂	h ₁	h ₂
1300	1300	150	835	255	45	100
机动叉车、685 液压车双向操作						

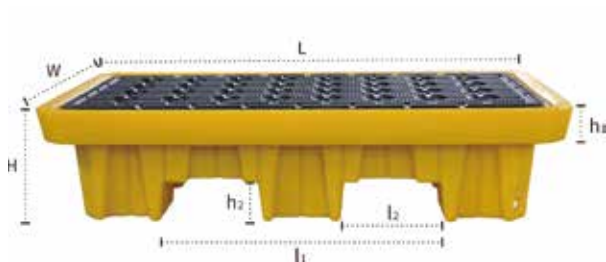


ZYPE022-H

聚乙烯托盘（两桶）						mm
L	W	H	l ₁	l ₂	h ₁	h ₂
1300	690	300	725	260	80	100
机动叉车、550/685 液压车双向操作						

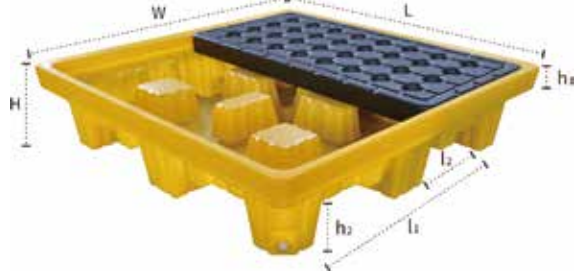


ZYPE044-H

聚乙烯托盘（四桶）						mm
L	W	H	l ₁	l ₂	h ₁	h ₂
1300	1300	300	845	350	80	100
机动叉车、550/685 液压车双向操作						

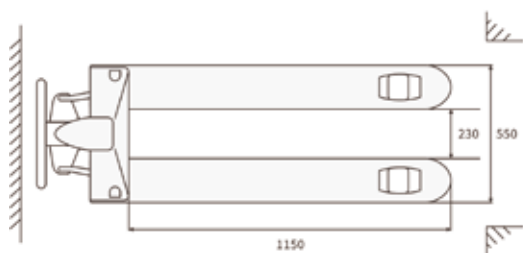

550 叉车

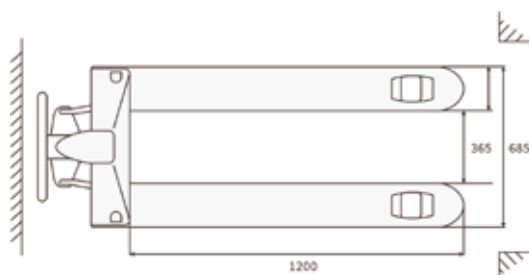

685 叉车

PE 贮存盘

通过欧盟 CE 认证，符合标准：EPA 40CFR 264.175, SPCC 40CFR112.7, NPDES 40 CFR 122.26

聚乙烯平台 / 聚乙烯托盘

- ◆ 加厚侧边框及中心承重结构，表面橘皮防滑格栅满载时不会发生劈裂，格栅可拆卸，利于处理盛漏液体。
- ◆ 可防控较小容积的泄露及滴漏，较低的平台工作面，使化学品桶更接近地面，利于装载、存取及分装操作。
- ◆ 聚乙烯材质制成，抗紫外线，防锈防腐蚀，可抗大多数化学品。
- ◆ 堆叠设计，节省空间及运输成本。



排水孔



机动叉车操作



类型	平 台			托 盘	
长 × 宽 × 高	mm	670×670×150	1320×680×150	1320×1300×150	1320×680×300
可容纳	200L 圆桶	1	2	4	2
渗漏量	加仑 / 升	10/40	21/80	40/150	31/120
承重	kg/ m²	693	1361	2772	1361
机动叉车操作		不适用	双向	四向	双向
型号		ZYPE001	ZYPE002	ZYPE004	ZYPE022

IBC 吨桶防漏托盘

聚乙烯托盘

- ◆ 高强度的 HDPE 制成，整体采用无缝隙结构设计，防漏结构通过测试，避免泄漏的发生。聚乙烯结构提供了优异的耐久性，化学抗性和抵抗紫外线。
- ◆ 不带网格和排水设计的整体支撑竖柱可以安全存储 1×1000 升或 1×1200×1100 毫米托盘圆桶或容器。
- ◆ 双端叉车插口，可以方便地从任意方向移动，可叠套设计可以将运输储存的空间节省到最小。

长 × 宽 × 高	mm	1650×1550×715
盛漏量	加仑 / 升	291/1100
承重	kg/ m²	1500
叉车操作		双向
型号		ZYPE-IBC



又名油污废品桶，适用于油渍易燃废弃物的收集、消除自燃隐患

- ◆ 桶身整体采用镀锌钢板结构，内外壁均喷涂环氧树脂涂层增强使用寿命。
- ◆ 自闭式桶盖设计，无外力作用下自动处于关闭状态，隔绝外部氧气供应，使燃烧无法继续。
- ◆ 扁圆柱体结构及抬高的桶底使空气沿桶体流动，散热、防潮、避免生锈。
- ◆ 提手式设计，便于搬运。
- ◆ 脚踏式开关控制，工作中解放双手，施力状态下桶盖开启。

容积：35L

参数：W440*D425*H490mm

型号：ZYOW（红色 / 黄色）



通过欧盟CE认证,符合美国职业安全健康管理局(OSHA)
OSHA 29 CFR 1910.125 & 1910.144 规范

生化垃圾桶

适用于大多数危化品固体废弃物、溶剂及废弃擦拭物、碎片等材料短暂放置，防止自燃，可独立或搭配防化处理袋使用

- ◆ 聚乙烯 HDPE 成型，坚固耐用抗腐蚀，贴有醒目的生化危险品标识。
- ◆ 桶内可存放浸有溶剂、稀释剂、亚麻籽油、可燃粘合剂和其他易燃液体的抹布或擦拭巾。
- ◆ 脚踏开盖控制，可自动闭盖。关闭状态下，桶中内容物与火源隔离，限制氧气量，使燃烧无法继续，消除自燃隐患。

容积：22.5L / 6 加仑

参数：W390*D440*H406mm

型号：ZYPW2006（红色）



便携式洗眼器

用于石油、化工、实验室、医用等领域，快速冲洗化学液体溅射的眼睛和脸部，使损伤程度降至最低

型号：H7501，16 加仑容量
H7500，8 加仑容量

- ◆ 材质：高密度聚脂材质。
- ◆ 容量：16 加仑储备量 60L，有效使用容积 40L，15 分钟不间断有效冲洗；8 加仑储备量 30L，0.4 加仑水量 / 分钟，20 分钟不间断流出，储存丰富。
- ◆ 注水孔：宽大的注水孔，易于注水，且配有防尘盖。
- ◆ 水流：由于出水孔做过特殊变径处理，所以水流更加温和丰富，出水量不低于 1.5 升 / 分钟。
- ◆ 可安装于墙壁或托架上，也可以与推车配套使用。



发生事故后，立刻引导受伤者尽快赶到最近的洗眼器安装地，以避免由于时间过长得不到冲洗；
平稳地拉下洗眼臂，即启动洗眼喷头出水；
洗眼时用手撑开受伤眼睛，充分冲洗，冲洗时间应不低于 15 分钟；洗完后，需进一步进行医疗。

紧急冲淋洗眼器

用于医药、化工、石化、电子，半导体企业中危险工作区域和实验室的紧急救护安全装置

- ◆ 主材为不锈钢，表面高亮度环氧树脂涂层，抗腐蚀，抗紫外线照射，防渗漏。
- ◆ 采用球阀和螺旋密封结构控制喷淋与洗眼。操作方便，启闭快速，密封可靠。



型号		ZYES01-S	ZYES02-S	ZYES03-A	ZYES04-A	ZYES08-S	ZYES-ME01
外尺寸	高 mm	2480	2480	2480	2480	2480	2480
管道	5/4 英寸	304 不锈钢	304 不锈钢	304 不锈钢 ABS 涂层	304 不锈钢 ABS 涂层	304 不锈钢	304 不锈钢
接水口	高 mm	1580	1580	1580	1580	1580	1580
废水出口	高 mm	150	150	150	150	150	150
脚踏板		无	有	无	有	有	无
淋浴流量	min	120-180L	120-180L	120-180L	120-180L	120-180L	120-180L
洗眼流量	min	12-18L	12-18L	12-18L	12-18L	12-18L	12-18L
水压	Mpa	0.25-0.4	0.25-0.4	0.25-0.4	0.25-0.4	0.25-0.4	0.25-0.4

上海众御实业有限公司相关资质



荣誉客户




实验室安全存储主旨：事前预防，胜过事后赔偿！

火灾会瞬间摧毁一切，会造成伤亡、财产损失等重大后果，甚至会无情地掠夺走您所拥有的一切。

什么方式可以帮助您预防及控制火灾危害呢？

安全储存是避免火灾风险的简单易行的手段。实现安全储存，对化学品进行分类分级管理非常重要！

ZOYET 提供高品质的易燃液体与化学品安全储存柜，帮助您安全地储存危险化学品，降低火灾风险。

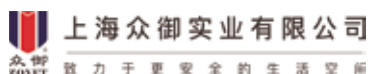

上海众御实业有限公司

地址：上海市徐汇区天钥桥路 811 号

电话：+86-4000-663-518 +86-21-56351153

网址：www.zoyetsafe.com

邮箱：sales@zoyet.com

邮编：200030